

CRYOSURGE

Maxani CryoSurge combineert traditionele cryotherapie en cryochirurgie met moderne aerosoltechnologie om een directe, veilige en effectieve behandeling te bieden voor een breed scala aan wratten, diverse huidletsels en enkele slijmvliesletsels. Een praktisch, snelle en veilige behandeling voor in de kliniek.

- **Direct gebruiksklaar**

CryoSurge vereist geen speciale opslag of voorbereiding, waardoor het direct inzetbaar is in elke medische praktijk.

- **Geen anesthesie nodig**

Voor het verwijderen van wratten en andere huidletsels is geen anesthesie of beschermende uitrusting nodig, wat het proces vereenvoudigt en veiliger maakt voor zowel de behandelaar als de patiënt.

- **Duurzaam en milieubewust**

Met een lange houdbaarheid en een ontwerp dat rekening houdt met het milieu, biedt Maxani CryoSurge een duurzame oplossing voor medische praktijken.

- **Snelle en effectieve behandeling**

Maxani CryoSurge versnelt het herstelproces zonder voorbereidings-tijd en is gemakkelijk te gebruiken, waardoor de behandel-tijd wordt geminimaliseerd.

- **Cryochirurgische precisie**

Door het getroffen gebied snel af te koelen, creëert Maxani CryoSurge een extreem koude omgeving die effectief het virus vernietigt dat verantwoordelijk is voor huidletsels.

Wanneer toegepast op het huidoppervlak, genereert Maxani CryoSurge temperaturen tussen -50°C en -54°C . Dit ligt ruim onder de temperaturen die celdood veroorzaken. De vorming van intra- en extracellulaire ijskristallen vernietigt de bovenste laag van de huid – zonder het gezonde weefsel te beschadigen. Effectieve behandeling wordt bereikt door herhaalde bevroers-dooicycli. De procedure is zeer kort, effectief en patiëntvriendelijk.

Maxani CryoSurge is uitgerust met een gepatenteerd stil toedienings-systeem in de spuitkop. De spuitkop is ontwikkeld om elke keer een consistente, gecontroleerde spray te leveren. Maxani CryoSurge bevat het gas norfluraan (R134a), dat al vele jaren wordt gebruikt in astma-inhalatoren en bewezen veilig is. Maxani CryoSurge is ontwikkeld door een familiebedrijf in farmaceutica en medische apparatuur in Denemarken. Het wordt sinds 2013 met succes gebruikt door diverse artsen en specialisten zowel humaan als veterinaire in heel Europa.



Maxani CryoSurge is bijzonder effectief voor de behandeling van:


- gewone huidletsels
- wratten
- diverse slijmvliesletsels



Wratje voor behandeling



Wratje na 1 behandeling

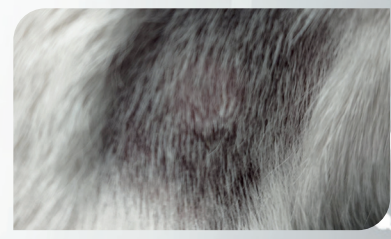

Wratje is weg na 2 behandelingen

